

Vous asseoir et voyager dans votre véhicule

Access Ability et BraunAbility proposent des produits qui permettent aux **personnes à mobilité réduite ou limitée de s'asseoir et voyager devant dans en véhicule et aussi de le conduire en toute sécurité.**

Ces sont des produits qui apportent à la fois **confort et sécurité** à leurs utilisateurs.



Comment ça marche?



Dans cette catégorie des produits :

1. L'**embase pivotante** : permet de faire sortir le siège du véhicule et de s'asseoir ou d'effectuer le transfert depuis un fauteuil roulant plus facilement.
2. Le **siège** : se fixe sur l'embase pivotante.
3. Le **fauteuil roulant Carony** : son siège se glisse à l'intérieur du véhicule et se transforme en siège de voiture en laissant l'utilisateur assis.

Vous pouvez choisir un **fauteuil roulant Carony et une embase pivotante compatible** ou tout simplement une **embase pivotante** et un **siège de voiture** et garder votre fauteuil roulant si vous en avez déjà un.


Embase pivotante



Siège



Fauteuil roulant Carony

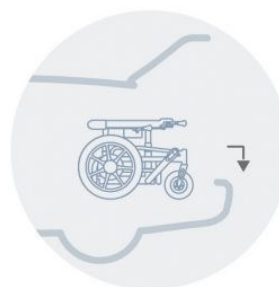

accès véhicule • transfert Fauteuil • adaptation conduite • transport pmr • harnais maintien • transfert pmr

Embase pivotante

Il y a une gamme variée des **embases pivotantes** pour satisfaire les multiples besoins des clients.


L'embase pivotante permet de pivoter ou de faire sortir le siège du véhicule. Ce dispositif vous permet de vous asseoir ou d'effectuer le transfert depuis un fauteuil roulant plus facilement.



Comment bien choisir son embase pivotante ?

Le choix de l'embase pivotante pour un utilisateur et sa voiture dépend d'un grand nombre de variables. La taille, la mobilité et le poids de l'utilisateur comme la hauteur de l'ouverture de la portière et l'angle du montant A et B de la voiture: tout a son importance pour obtenir un produit adapté à son véhicule et à ses besoins.

Le tableau ci-dessous donne quelques recommandations. Une fois que vous avez une idée de l'embase pivotante adapté aux besoins de votre utilisateur, **contactez-nous pour savoir si votre choix est compatible avec votre taille, votre véhicule, s'il existe des supports de montage spécifiques** ou pour obtenir toute autre information utile. Il existe des méthodes fiables pour vérifier cette compatibilité avant de passer votre commande.

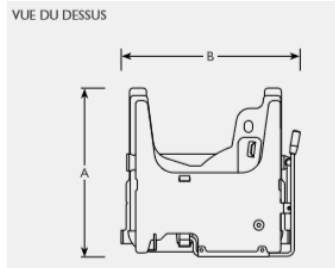

Différents types et modèles d'embase pivotante

Produit	Description	Pivotement	Levage	Extention	Réglage longitudinal	Capacité
TURNOUT	Embase pivotante	Manuel	Non	Non	Non	180 kg
TURNOUT E	Embase pivotante	Électrique	Non	Non	Non	180 kg
TURNY Manual	Embase pivotante	Manuel	Non	Manuelle	Oui	150 kg
TURNY Low Vehicle	Embase pivotante programmable	Électrique	Non	Électrique	Oui	140 kg
TURNY HD	Embase pivotante et élévateur de siège	Manuel	Électrique	Non	Non	170 kg
TURNY ORBIT	Embase pivotante et élévateur de siège	Électrique	Électrique	Non	Non	170 kg
TURNY EVO	Embase pivotante et élévateur de siège programmable	Électrique	Électrique	Non	Électrique	180 kg
6-Way Base	Embase pivotante interieur 6 positions	Électrique	Non	Non	Électrique	180 kg

Turnout



Turny Low vehicle



Turny Evo



accès véhicule • transfert Fauteuil • adaptation conduite • transport pmr • harnais maintien • transfert pmr

10 Bis rue du 11 novembre • 80270 Airaines • HAUTS DE FRANCE • France
 contact@access-ability.eu • 03 22 25 58 65

www.access-ability.eu

Siège et accessoires

Le choix d'un siège adapté à vos besoins et à votre véhicule est nécessaire pour voyager serein, confortablement et en toute sécurité.



Différents modèles de sièges

1



2



3



4



1. Le siège **CAROSEAT Flex** : exceptionnel pour les adultes comme pour les enfants. Il est doté d'un appuie-tête rétractable qui réduit la hauteur du siège auto pour faciliter l'entrée et la sortie. Caroseat Flex offre une adaptation flexible du véhicule et un réglage
2. Le siège **RECARO** : siège **baquet, bas, confortable, économique.**
3. Le siège **BEV** : siège **ergonomique, bas**, diverses **options** pour l'adaptation individuelle, **coussins** de dossier et de siège du milieu **amovibles.**
4. Le siège **BEV KIDS (enfants)** : support nécessaire aux enfants en pleine croissance grâce à son **cale-tronc** et son **appui-nuque réglables.**

Accessoires pour siège

Fonction d'**inclinaison TILDA** permet de basculer le siège en trois étapes pour plus d'espace pour la tête lors du transfert. Le repose-pieds optionnel permet de passer plus facilement les pieds au-dessus du seuil lors du pivotement. L'inclinaison du siège permet également de soulager l'individu des contraintes dues au maintien d'une position assise pendant des périodes prolongées.


Réglage longitudinal CAROSLIDE est un système de réglage électrique du siège qui peut vous procurer l'espace supplémentaire dont vous avez besoin pour les jambes lors du pivotement vers l'intérieur ou l'extérieur. Ou peut-être tout simplement pour être assis de manière confortable.



Pour vérifier la compatibilité entre les accessoires et les sièges allez voir le tableau de la page 5 .

Fauteuil roulant Carony

Le système de fauteuil roulant Carony permet de monter dans le véhicule en restant assis et d'éliminer complètement le levage pendant le transfert. Pour cela, vous avez besoin de l'aide d'un accompagnant. Ancrez le fauteuil roulant Carony et faites glisser l'ensemble du siège à l'intérieur de la voiture pour remplacer le siège du véhicule. Sans même avoir à quitter le siège où vous vous trouvez, vous pouvez maintenant profiter du confort et de la sécurité en voyageant devant ou à l'arrière.

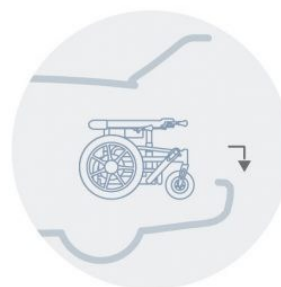

Le fauteuil roulant Carony est conforme aux mêmes normes et réglementations que tout fauteuil roulant normal.

Différents modèles de fauteuil roulant Carony

			
CARONY	Carony 12"	Carony 24 "	Carony 16"
Manuel/Électrique	Manuel	Manuel	Manuel
Siège	Inclut (au choix, voir tableau page 5)	Inclut (au choix, voir tableau page 5)	Inclut
Châssis réglable hauteur	En option	En standard	En standard
Roues arrières	12"	24"	16"
Roues avant	8"	7"	7"
Repose pieds	En standard	En standard	En standard (réglable)
Appui-tête	En fonction de siège	En fonction de siège	En standard (réglable)
Poignée de poussée	En standard	En standard	En standard (avec freins)
Accoudoirs	En standard	En standard	En standard (réglables)
Protection antibasculement	En option	En standard	En option
Capacité	100 kg	100 kg	120 kg
Poids	15 kg	19 kg	15,5 kg
Position levier frein	Droite/Gauche	Droite/Gauche	Droite/Gauche
Matériau châssis	Métal	Métal	Métal
Couleur châssis	Rouge	Rouge	Noir
Avertisseur sonore	Non	Non	Non
Phare, clignotant, feux recul	Non	Non	Non
Personnes toutes tailles	Oui	Oui	Oui
Autonomie	***	****	*****
Ergonomie et confort	En fonction de siège	En fonction de siège	*****
Installation simple	****	****	*****
Design élégant	****	****	*****

Fauteuil roulant Carony

Complétez votre choix avec d'autres produits de la gamme BraunAbility !



accès véhicule • transfert Fauteuil • adaptation conduite • transport pmr • harnais maintien • transfert pmr

10 Bis rue du 11 novembre • 80270 Airaines • HAUTS DE FRANCE • France
 contact@access-ability.eu • 03 22 25 58 65

www.access-ability.eu

Matrice compatibilité embases pivotantes, sièges et systèmes Carony

Vue d'ensemble

	BEV	Compact	Caroseat® Flex	BIS
Turnout	OUI ¹	OUI ¹	OUI ¹	NON
Turny® Manual	NON	NON	OUI	NON
Turny® Low Vehicle	OUI	NON	OUI	NON
Turny® HD/Orbit	OUI	OUI	OUI	NON
Turny® Evo	OUI	OUI	OUI	OUI ²
Turny® 6-Way	OUI ¹	OUI ¹	OUI ¹	NON

1. nécessite des glissières

2. uniquement disponible comme solution kit

PRODUCT	CARONY COMPATIBILITY		ACCESSORIES COMPATIBILITY		
	CARONY 16"	CARONY CLASSIC	TILDA TILT	CARO-SLIDE	SLIDE RAILS
Turnout SWIVEL BASE	✗	✓ ²	✓	✓ ⁶	✓
Turnout E SWIVEL BASE	✗	✓ ²	✓	✗	✓
Turny Manual SWIVEL BASE	✓	✗	✗	✗	built in
Turny Low Vehicle SWIVEL BASE	✗	✗	✗	built in	✗
Turny HD SEAT LIFT	✓ ³	✓ ²	✗	✗	✓
Turny Orbit SEAT LIFT	✓ ³	✓ ²	✗	✗	✓
Turny Evo SEAT LIFT	✓ ³	✓ ³	✓	built in	✗
Turny 6-Way INWARD SWIVEL BASE	✗	✗	✗	✗	✓ ⁵

1. Nécessite plaque d'adaptation

2. Nécessite rails pour Carony

3. Nécessite une plaque d'adaptation avec rails Carony

4. Nécessite glissières

5. Requis pour l'installation sur des sièges non d'origine

6. Uniquement compatible avec Turnout 2

Transfert de la personne

La gamme **BraunAbility** des **embases pivotantes, sièges et fauteuils Carony** est très variée. Contactez-nous pour savoir si votre choix est compatible avec votre taille, votre véhicule, s'il existe des supports de montage spécifiques ou pour obtenir toute autre information utile.

accès véhicule • transfert fauteuil • adaptation conduite • transport pmr • harnais maintien • transfert pmr

10 Bis rue du 11 novembre • 80270 Airaines • HAUTS DE FRANCE • France

contact@access-ability.eu • 03 22 25 58 65

www.access-ability.eu