

Fauteuil roulant embase roulante Carony Go

Le fauteuil roulant embase roulante Carony Go est un fauteuil roulant motorisé qui se transforme en siège de véhicule, en vous laissant assis tout au long de la manœuvre.

Arrimé à une embase pivotante ou à un élévateur, le siège du fauteuil roulant peut coulisser de sa base sur la plaque d'arrimage où il se verrouille en toute sécurité pour remplacer le siège du véhicule. Ce système est particulièrement pratique pour les **utilisateurs corpulents** accompagnés d'un soignant de force limitée, ou si le transfert depuis le fauteuil roulant est douloureux pour l'utilisateur.



Caractéristiques du fauteuil roulant Carony Go

- Un seul et même siège pour le fauteuil roulant et pour le véhicule
- Variateur de vitesse
- Réglage motorisé de la hauteur
- Avertisseur sonore
- Phares et clignotants en option
- Compatible avec la **fonction de basculement Tilda**
- **Anti-basculement** en standard
- Vitesse maximale **6,5 km/h**
- **Autonomie 25 km**
- Temps de **chargement** complet jusqu'à **8 heures**
- Tension secteur 230 V AC, 50 Hz
- Convient aux personnes de toutes tailles, y compris les personnes de petite taille et les enfants
- **Empattement étroit** pour les déplacements à l'intérieur

COMPATIBILITÉ DE L'EMBASE PIVOTANTE

TURNOUT	TURNY MANUAL	TURNY LOW VEHICLE	TURNY HD/ORBIT	TURNY EVO	6-WAY BASE
✓ ²	✗	✗	✓ ²	✓ ²	✗

2. nécessite des rails Carony

EMBASE PIVOTANTE	RAILS D'ARRIMAGE CARONY
Turnout	475 mm (102720)
Turny HD/Orbit	475 mm (102720)
Turny Evo	550 mm plaque d'adaptation comprise** (102811)




Adresse : BP19, 80490 Hallencourt, France

Tel : +33 (0)3 22 25 58 65 / Mobile : + 33 (0)6 45 72 46 90


contact@access-ability.eu
www.access-ability.eu

Dimensions et modèles


VUE DU DESSUS

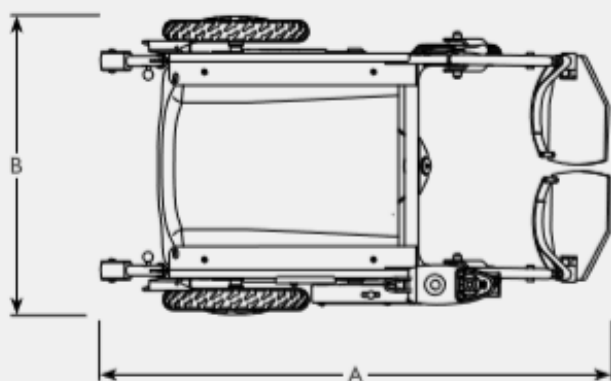


VUE DU DESSUS

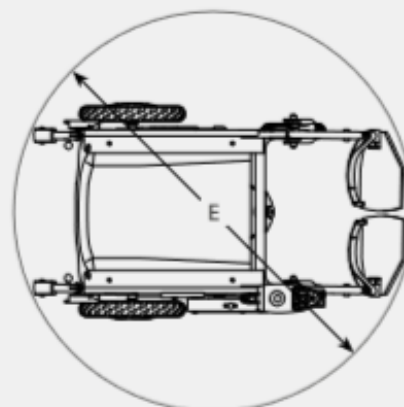

VUE LATÉRALE

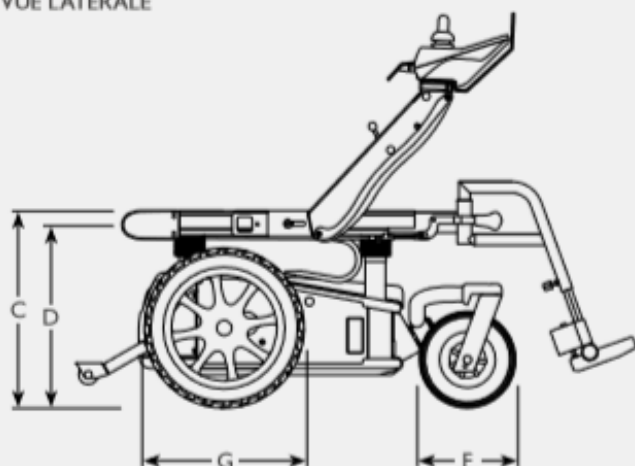

VUE LATÉRALE

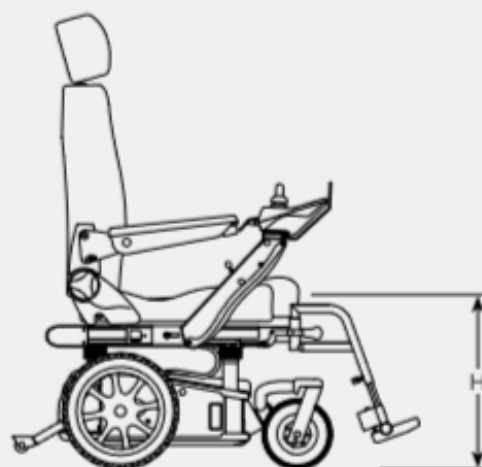

Fautueil roulant Carony Go

Carony Go		Clak de la télécom- mande	Hauteur des obstacles	Longueur	Largeur	Hauteur	Hauteur d'arrimage	Rayon de braquage	Diamètre roues avant	Diamètre roues arrière	Hauteur du siège	Poids maximal de l'utilisateur	Poids de l'unité
				A	B	C	D	E	F	G	H		
101527	Carony Go	droite	8	75	65	38-50	34-46	90	20	31,5	43-55	120	93 / 75
101528	Carony Go	gauche	8	75	65	38-50	34-46	90	20	31,5	43-55	120	93 / 75
102634	Carony Go, éclairage compris	droite	8	75	65	38-50	34-46	90	20	31,5	43-55	120	93 / 75
102635	Carony Go, éclairage compris	gauche	8	75	65	38-50	34-46	90	20	31,5	43-55	120	93 / 75

Tous les poids et dimensions sont exprimés en kilogrammes et en centimètres et ne sont communiqués qu'à titre de référence. La capacité fait référence au poids total du siège, des accessoires et de l'utilisateur.

Pour garantir votre sécurité, les produits BraunAbility sont conçus et testés conformément aux directives et aux normes en vigueur.

Contactez-nous pour un devis gratuit sur mesure !



Adresse : BP19, 80490 Hallencourt, France

Tel : +33 (0)3 22 25 58 65 / Mobile : + 33 (0)6 45 72 46 90

contact@access-ability.eu
www.access-ability.eu